

Cellion primax

signia

Life sounds brilliant.

Hör ljudens färger.

Vår nya Cellion hörapparat.
Revolutionerande batterilöst hörande.



Hearing
Systems

SIEMENS

signia-hearing.se



Nya Cellion.

Få ut det mesta av din dag.

Välkommen till nästa generation inom hörapparatteknologi i en smart OneShell design. Med dess pålitliga och högpresterande litiumjon battericell ger Cellion™ upp till två dagars användande på en enda laddning. Så att du inte behöver oroa dig för att batteriet ska ta slut helt plötsligt. Plus att induktiv laddning betyder total bekvämlighet.



Cellion

touchControl App

Laddare

Njut av livets sanna ljud.

Vare sig det är i ett öppet kontorslandskap, en affär eller en hektisk restaurang, vart än det är en hög nivå av bakgrundsljud krävs det koncentration och ansträngning för att hålla en konversation. Ansträngningen för att höra röster i dessa situationer är uttröttande - ett faktum som även personer med normal hörsel är bekanta med.

Cellion tacklar dessa utmaningar. Dess avancerade funktion SpeechMaster övervakar kontinuerligt vad du lyssnar på. Den fokuserar automatiskt på din konversationspartner medan den samtidigt reducerar bakgrundsbrus och oönskade röster. Du kommer tydligt att höra det du vill höra. Som ett resultat av detta kan lyssnande med Cellion vara ännu mindre påfrestande än normalt hörande. Hela dagen lång. I alla situationer.



Cellion hörapparater:

Ladda upp ditt liv.

Glöm batterier.

Storslagen design handlar inte bara om det estetiska – det är en intelligent blandning av form och funktion. Med Cellions unika OneShell design har vi kombinerat båda delarna för att utveckla ännu en av världens första: en litium-jon hörapparat utan laddkontakter.

Cellions uppladdningsbara litium-jon battericell använder induktiv laddningsteknologi utan något pill med hörapparatbyten. Placera bara din Cellion hörapparat i laddaren och den smarta teknologin tar sedan hand om resten.

När du tar hörapparaterna från laddaren kommer de att starta automatiskt. Och sedan kommer de bara att fortsätta fungera – den enda hörapparaten med obegränsad streaming som håller i upp till två dagar på en laddning. Och ifall du behöver lite extra energi ger en laddning på bara 30 minuter ytterligare batteritid på hela sju timmar!

Ännu ett mästerverk i design från Signia – en perfekt kombination av enkelhet och prestanda.

Battericell med hög kapacitet

Håller 24 timmar med obegränsad streaming.

Inget batterifack

Automatisk på/av-funktion under laddning och inget mer pill med batterier gör Cellion till den enklaste hörapparaten att hantera.


Cellion



Induktiv laddning

Cellion är världens första hörapparat som kombinerar litium-jon teknologi med induktiv laddning.

Cellion
Verklig storlek i cm

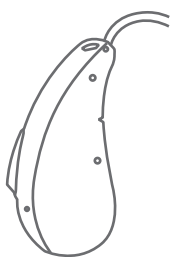

Cellions utbud av naturliga färger är designade för att matcha en variation av hår- och hudtoner.




Tillbehör till Cellion hörapparater:

Behåll kontrollen.

Trådlösa funktioner för uppkopplade livsstilar.

Den ultimata lösningen för diskret kontroll: med touchControl App™* kan du justera Cellion från din smartphone.

För en ännu mindre lösning kan du enkelt hänga miniPocket™ på din nyckelring för en diskret och enkel fjärrkontroll.

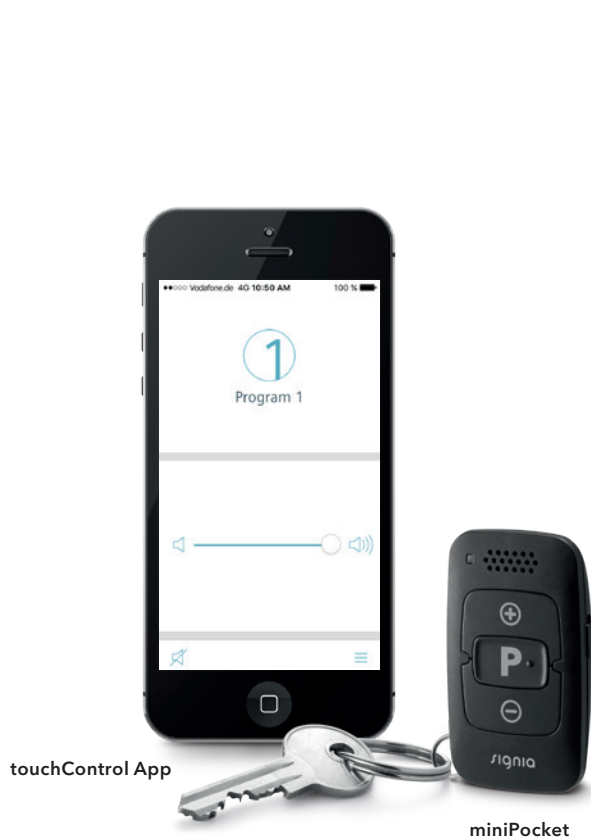

För fullständig kontroll kan du styra dina Cellion hörapparater och streama ljudet från din TV eller stereo med easyTek™* och easyTek App™*.

Fråga gärna din audionom om vilka tillbehör som är bäst för dig.



* Kompatibel med Android och iOS, båda apparna är gratis att ladda ner.

Informationen i det här dokumentet innehåller allmänna beskrivningar av tekniska funktioner som inte alltid ingår i enskilda fall och som kan ändras utan förvarning.

Bluetooth-varumärket och logotyperna tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av dessa varumärken och logotyper från Signia GmbH:s sida sker enligt licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.

Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc. Apple App Store är ett varumärke som tillhör Apple Inc.

Juridisk tillverkare

Signia GmbH
Henri-Dunant-Strasse 100
91058 Erlangen
Germany

Signia GmbH använder varumärket Siemens enligt licensavtal med Siemens AG.

Kontaktinformation i Sverige

Sivantos A/S
Knarrarnäsgatan 7
164 40 Kista

Telefon 08 400 22 390

eur0055/1/1.000/0816

Order No. 02921-99C1-7600 | © 07.2016 Signia GmbH

Hitta oss på:

signia-hearing.se

facebook.com/signiahearing

youtube.com/signiahearing